

Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend,
Familie und Senioren | Postfach 70 61 | 24170 Kiel
Mail-Verteiler

04.02.2021

Qualitätsmangel bei KN95-Masken

Sehr geehrte Damen und Herren,

über das Gesundheitsamt Bad Segeberg wurde dem Sozialministerium zur Kenntnis gegeben, dass mangelhafte KN95 Masken in Schleswig-Holstein im Umlauf sind. Es kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht ausgeschlossen werden, dass die Mängel der Art so gravierend sind, dass das Infektionsgeschehen dadurch begünstigt werden könnte. Die genaue Herkunft der Masken wird noch geprüft.

Es handelt sich um folgendes Produkt (Foto beigefügt):

KN95 Protective Mask

Model No: ZX-168

GB-2626-2006

Wir raten zum jetzigen Zeitpunkt bis zur endgültigen Klärung dringend vom Gebrauch ab!

Die oben benannten partikelfiltrierende Halbmaske Typ ZX-168 entsprechen nach unseren derzeitigen Kenntnissen nicht den Anforderungen der geltenden SARS-CoV-2-Arbeitschutzverordnung.

Dieses Produkt ist bisher im Rahmen der Produktsicherheit i.V.m. der Verordnung 2016/425 über persönliche Schutzausrüstung nirgendwo getestet worden.

Wir möchten Sie bitten, Ihren Bestand an KN95-Masken anhand der übermittelten Informationen zu überprüfen. Sollten Sie ebenfalls über Masken des beschriebenen Typs verfügen, möchten wir Sie bitten, diese so auszusortieren, dass diese von den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern auch nicht versehentlich verwendet werden können.

Gleichzeitig bitten wir Sie uns darüber zu informieren, woher Sie diese KN95-Maske des beschriebenen Typs bezogen haben.

Bitte senden Sie uns – wenn möglich, auch mit entsprechenden Fotos dokumentiert – die Informationen an folgende Mailadresse: buengerfragen.coronavirus@sozmi.landsh.de.

Rechtliche Einordnung:

Es handelt sich bei dieser Maske weder um eine CPA noch eine FFP2 oder vergleichbare Maske.

Sollten diese Maske vom Bund im Rahmen seiner hoheitlichen Aufgaben nach § 5 Absatz 2 Nummer 4 Buchstabe c des Infektionsschutzgesetzes beschafft sein und über diesen Weg zu Ihnen gelangt sein, müsste theoretisch ein vom TÜV-Nord gefertigtes Gutachten beiliegen, um die Verkehrsfähigkeit nachzuweisen. Diese liegt offensichtlich nicht vor.

Wenn die in § 3 (1) Corona-ArbSchV angegebenen Rahmenbedingungen (Raumbelegung Person/ 10 qm// Mindestabstand etc.) nicht eingehalten werden können, darf diese Maske aus Sicht des Arbeitsschutzes nicht eingesetzt werden!

Wenn möglich geben Sie diese Masken zurück.

Mit freundlichen Grüßen

gez. Bach

Anlage: Fotos der betroffenen Maske

Allgemeine Datenschutzhinweise:

Der telefonische, schriftliche oder elektronische Kontakt mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit, Jugend, Familie und Senioren ist mit der Speicherung und Verarbeitung der von Ihnen ggf. mitgeteilten persönlichen Daten verbunden. Rechtsgrundlage hierfür ist Art. 6 Absatz 1 Buchstabe e der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) der Europäischen Union. Weitere Informationen erhalten Sie hier:

<https://www.schleswig-holstein.de/DE/Serviceseiten/Datenschutzerklaerung/datenschutzerklaerung.html>

MODEL NO:
ZX-168

☆☆☆☆
KN95


BFE ≥ 95%

**PROTECTIVE
MASK**

COMFORTABLE
PROTECTIVE
MASK

- FACILITY
- FLIGHTY
- DEFEND
- BREATHER

USE ECO-FRIENDLY NON-WOVEN FABRICS, MELTBLOWN AND OTHER MULTILAYER FABRICS TO EFFECTIVELY RESIST FINE PARTICLES AND DROPLETS IN AIR POLLUTION.

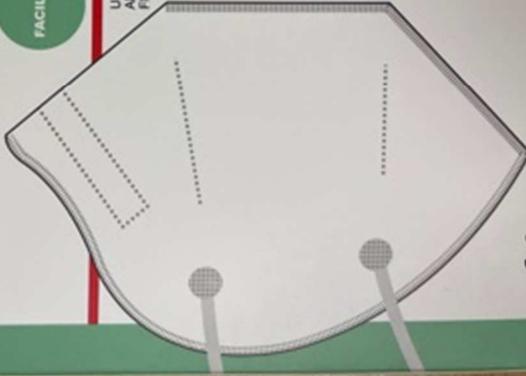

FOUR LAYERS

20 PCS

CE EN149:2001+A1:2009 FFP2 NR D

FUNCTION

WEARING TO COVER AND PROTECT THE MOUTH AND NOSE, CAN EFFECTIVELY PREVENT THE INHALATION OF DUST AND DROPLETS.

USAGE

1. FACE THE MASK WITHOUT THE NOSE CLIP, AND THE NOSE CLIP SHOULD BE ON TOP;
2. HOLD THE MASK ON YOUR FACE AND AGAINST YOUR CHIN;
3. PULL THE STRAPS ON BOTH SIDES AND HANG ON THE EARS, AND ADJUST TILL YOU FEEL COMFORTABLE;
4. PUT YOUR FINGERS IN THE MIDDLE OF THE METAL NOSE CLIP, AND MOVE YOUR FINGERTIPS TO BOTH SIDES UNTIL THE NOSE CLIP IS FULLY PRESSED INTO THE SHAPE OF THE NOSE SLOPE;
5. PUT YOUR HANDS ON YOUR FACE TO CHECK THE TIGHTNESS WITH YOUR FACE.



PRODUCT INFORMATION

PRODUCT NAME: PROTECTIVE MASK

PRODUCT FEATURE AND COMPOSITION: THIS PRODUCT IS LAMINATED FROM MULTIPLE LAYERS OF THIN FABRIC

SIZE: ADULT

MANUFACTURER: ZHONGSHAN CITY ZHONGXIN GIFT CO.,LTD

PRODUCTION ADDRESS: NO.188 ROAD 5 DONGHAI DONGFENG TOWN

ZHONGSHAN GUANGDONG CHINA

IMPLEMENTATION STANDARD: GB 2626-2006

DATE OF MANUFACTURING: SEE INNER BOX CERTIFICATE

VALIDITY: 3 YEARS

PACKING SPECIFICATION: 20 PCS/CASE

STORAGE: STORED IN A VENTILATED, DRY, HYGIENIC AND NON-CORROSIVE GAS PLACE.

CAUTION: PATIENTS WITH DIFFICULTY BREATHING OR CONGENITAL HEART DISEASE,

PLEASE USE WITH CAUTION;

THIS PRODUCT CANNOT BE USED AS A GAS MASK IN A TOXIC ENVIRONMENT.

MADE IN CHINA



